Anleitung · Burmeier

Gebrauchsanweisung Betttisch Pleto

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	03/2024

Burmeier Pleto Beistelltisch – Höhenverstellbarer Betttisch mit Gasdruckfeder bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Burmeier-Pleto-Beistelltisch-Hoehenverstellbarer-Betttisch-mit-Gasdruckfeder

Code scannen

Betttisch-Server Pleto

Gebrauchsanweisung

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN, SORGFÄLTIG LESEN!

STIEGELMEYER

Traglast:
max. 15kg mittig



Betttisch: Höhe anheben


An Galeriebügel gleichmäßig nach oben ziehen.

Rollenfeststellung

Fest=Pedal treten

Gelöst= Pedal anheben

Betttisch: Höhe absenken

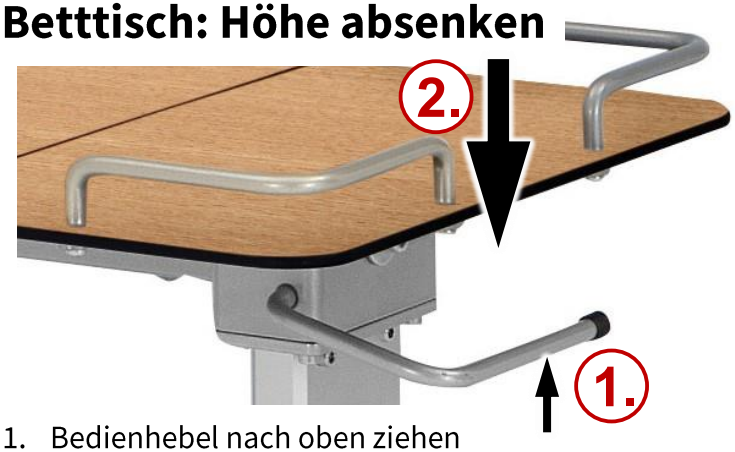

1. Bedienhebel nach oben ziehen
2. Betttisch durch Drücken in gewünschte Höhe bringen;
3. Bedienhebel loslassen

Betttisch: Schwenkung



1. Bedienhebel unter Betttisch nach oben ziehen
2. Betttisch schwenken und
3. Bedienhebel in gewünschter Position loslassen;
4. Betttisch weiter drehen bis zum Einrasten;

Sicherheitshinweise



Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise!

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, um Schäden durch Fehlbedienung zu vermeiden.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Betttisch-Server vor der Erstbenutzung und jedem Wiedereinsatz.
- Weisen Sie jeden Patienten in die sichere Bedienung des Betttisch-Servers ein!
- Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung vom ordnungsgemäßen und fehlerfreien Zustand des Betttisch-Servers!
- Die maximale Belastung der Betttischplatte beträgt 15 kg mittig.
- Nicht aufstützen! Kippgefahr!

Allgemeine Hinweise

1. Freilauffunktion

In Abhängigkeit von Toleranzen in der Säulenkonstruktion und Gasfederbefüllung sowie Umgebungstemperaturschwankungen kann sich der Betttisch aus der untersten Verstellposition eigenständig um ca. 5,0cm nach oben verstellen.

2. Betttischplatten

Die Betttischplatten können bedingt durch Lagerung und Temperatur-schwankungen leichte Durchbiegungen aufweisen, die auf die Funktion jedoch keine Auswirkungen haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Betttisch-Server zur Verwendung in Patientenzimmern von Krankenhäusern und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.
- Der Betttisch-Serverdarf nicht als medizinischer Gerätewagenverwendet werden.

Wichtige Hinweise zu Reinigung und Pflege

- Wir empfehlen Rückstände (Kaffee, Tee, Fruchtsäfte) innerhalb von 72-96 Stunden mit lauwarmem Wasser oder einem Mittel zur Reinigung und Flächendesinfektion zu entfernen.
- Verschmutzungen mit eingefärbten Desinfektionsmitteln müssen unverzüglich, jedoch spätestens nach 24 Stunden entfernt werden. Bei längerer Einwirkzeit ist eine Schatten-bzw. Restfleckenbildung nicht auszuschließen.
- Bei Verunreinigungen mit lösemittelhaltigen Produkten wie Druckerschwärze oder Filzstift empfehlen wir den Einsatz von Spiritus.
- Zur Pflege können die Oberflächen gelegentlich mit einem Kunststoffreiniger behandelt werden.

Nicht verwendet werden dürfen:

- Topfschwämme, Stahlwolle, Scheuermilch oder andere kratzende Mittel;
- Reinigungsmittel auf Aceton-Basis.

Betttisch-Server Pleto

Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Außenmaße (BxHxT): 900mm x 690mm x 420mm

Laufrollen: 2 Stück Doppelrolle je 50mm; Einzelrad-Feststellung
2 Stück Doppelrolle je 50mm


Betttisch

Abmessungen: 420mm x 650mm
Belastbarkeit: max. 15kg in der Mitte
Verstellbereich: ca. 690mm - 1040mm

Wartung:

Der Betttisch-Server ist wartungsfrei.

Maßskizze

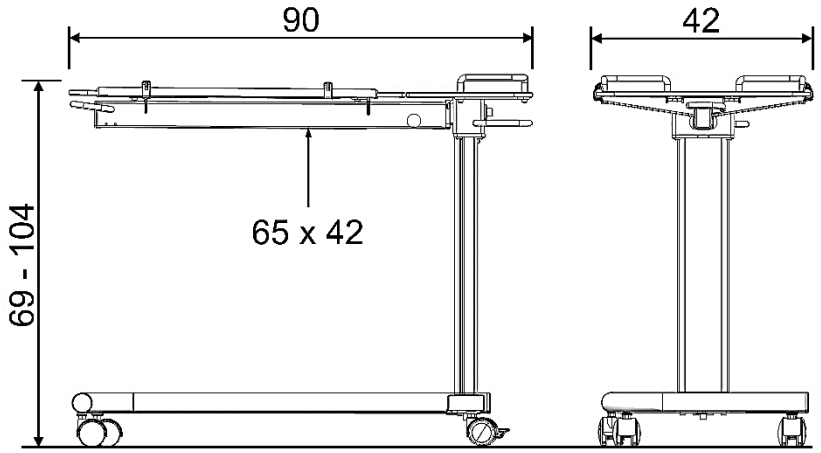

Ersatzteile

Um Funktionssicherheit und Garantieansprüche zu erhalten, dürfen nur Stiegelmeyer Original-Ersatzteile verwendet werden!

Für Ersatzteilbestellungen, Kundendienstanforderungen und bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42,
32051 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-777
Fax: +49 (0) 5221 / 185-219
Email: servicezentrum@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Kunden außerhalb Deutschlands können sich mit allen Fragen an unsere Vertriebsgesellschaften im jeweiligen Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite.