
# Handschalter - HB 400

! Vor der Moduswahl muss die Liegefläche horizontal gefahren werden


Gilt für die Betten Regia, Regia Partner, Lenus, Libra, Libra Partner, Elvido und Venta

## Minimalposition

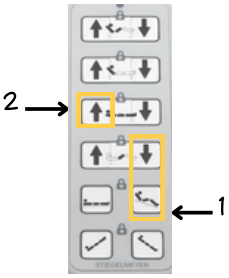


**Speichern der Position**

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Minimalposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

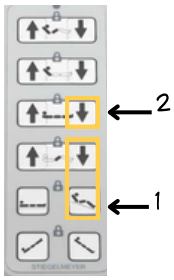



**Rücksetzen auf Werkseinstellungen**

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2),
- Die Werkseinstellung wird durch einen kurzen Signalton bestätigt




## Zwischenstopp

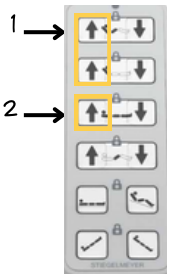


**Speichern der Position**

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Zwischenposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

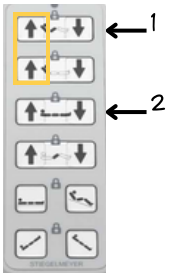



**Rücksetzen auf Werkseinstellungen**

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss für 5 Sekunden die Taste (2), bis der Signalton verstummt




## Höchstposition

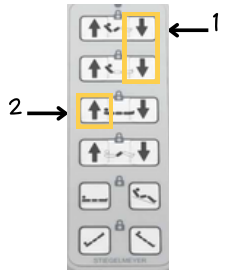


**Speichern der Position**

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Höchstposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

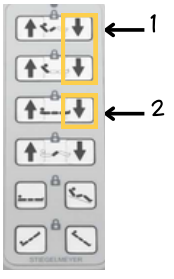


**Rücksetzen auf Werkseinstellungen**

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2),
- Die Werkseinstellung wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

