Unterlage · Burmeier

Handschalter HL7 (Datenblatt)

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	03/2025

Pflegebett Regia bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Regia-EasySwitch-Holz

Code scannen


STIEGELMEYERGROUP

Handschalter - HL 7

! Vor der Moduswahl muss die Liegefläche horizontal gefahren werden


Gilt für die Betten Regia, Regia Partner, Lenus, Libra, Libra Partner, Elvido und Venta

Minimalposition

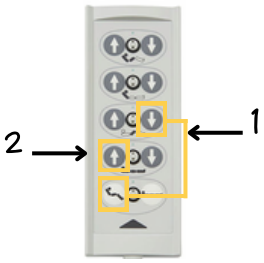

Speichern der Position

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Minimalposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

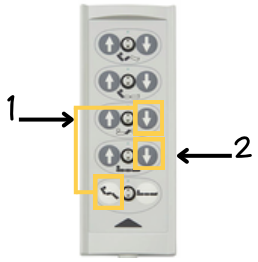


Rücksetzen auf Werkseinstellungen

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2),
- Die Werkseinstellung wird durch einen kurzen Signalton bestätigt




Zwischenstopp

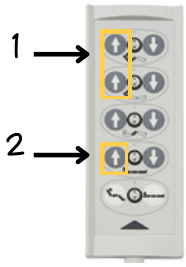

Speichern der Position

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Zwischenposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

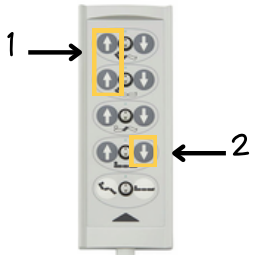


Rücksetzen auf Werkseinstellungen

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss für 5 Sekunden die Taste (2), bis der Signalton verstummt




Höchstposition

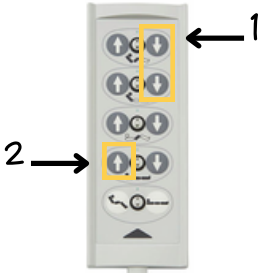

Speichern der Position

- Stellen Sie das Bett in die gewünschte Höchstposition
- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2)
- Die neue Position wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

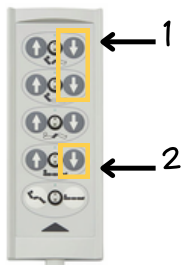

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

- Drücken Sie dreimal hintereinander gleichzeitig die Tastenkombination (1)
- Drücken Sie direkt im Anschluss die Taste (2),
- Die Werkseinstellung wird durch einen kurzen Signalton bestätigt

