Anleitung · Burmeier

# Montageanleitung Holzhaube Dali

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

| HERSTELLER | UMFANG | STAND |
|---|---|---|
| Burmeier GmbH & Co. KG | 4 Seiten im Original | 05/2019 |

## Holzhauben für Dali und Allura II bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

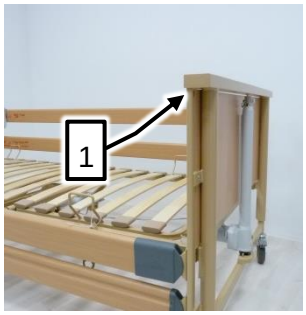
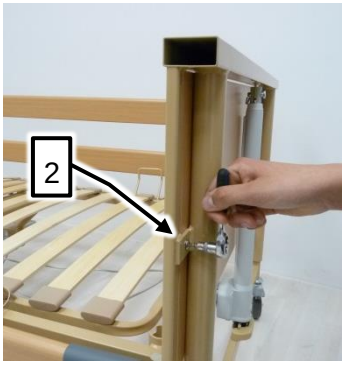
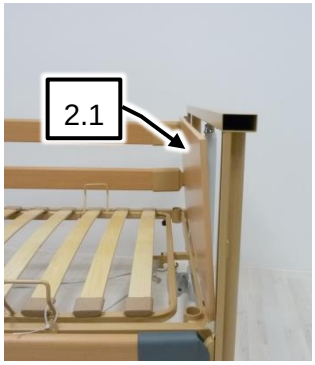
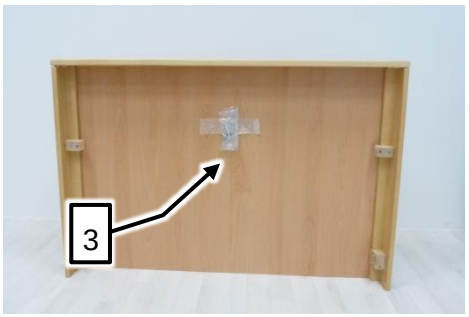
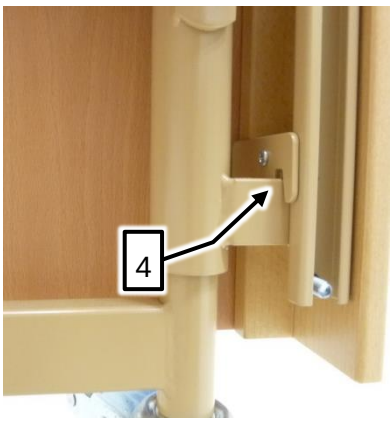
careshop-24.de/Holzhauben-fuer-Dali-und-Allura-II

Code scannen

# Pflegebett Dali DE + EN

## Montageanleitung der Holzhaube für das kopf- bzw. fußseitige Fahrgestell

Gehen Sie wie folgt vor:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bett für die Montage vorbereiten:<br>Entfernen Sie die beidseitig eingesteckten Stopfen [1] aus dem Querprofil des Fahrgestells. |   |
| 2. | Demontieren Sie auf der linken und auf der rechten Seite die beiden Schrauben [2], sodass das Füllbrett gelöst ist [2.1]. |   |
| 3. | Entnehmen Sie nun die neuen Schrauben aus der Tüte, die sich auf der Rückseite der Haube befindet [3]. |   |
| 4. | Setzen Sie als nächstes die Haube so auf das Fahrgestell, dass die Haken auf der Innenseite der Haube (auf beiden Seiten) genau in die Laschen des Fahrgestells greifen [4]. |   |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Fügen Sie nun das Füllbrett des Fahrgestells und die Haube mit den neuen Schrauben (aus Schritt 3) zusammen [5]. |   |
| 6. | Endergebnis der Montage |  |

**Burmeier GmbH & Co. KG** (Ein Unternehmen der Stiegelmeyer-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe - Telefon: + 49 (0) 5232 / 9841- 0 - Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 41

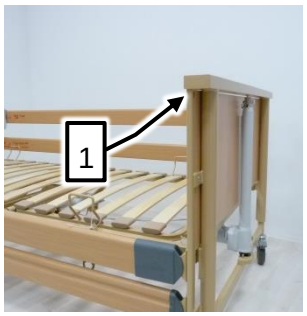
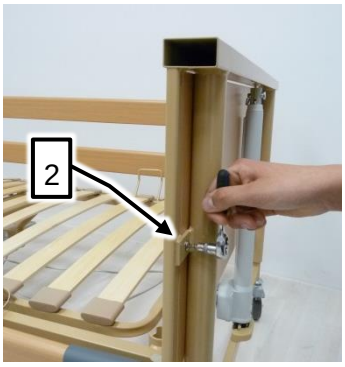
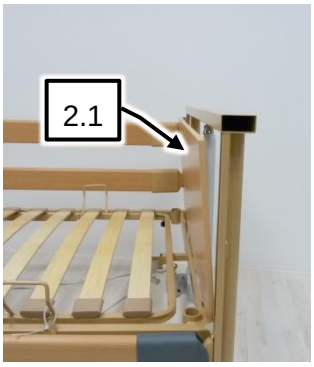
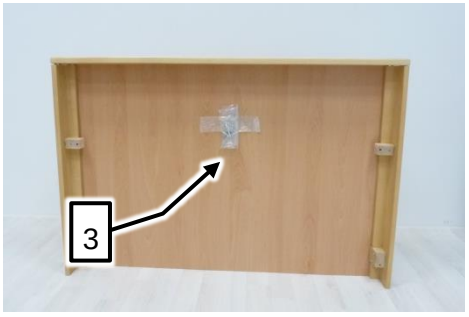
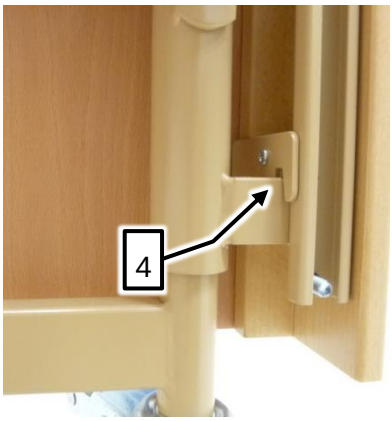
www.burmeier.de E-Mail: info@burmeier.de

2019-04-18 | Version 0 | 279525

# Dali care bed EN + DE

## Installation instructions for attaching wooden surround to chassis head or foot end

Proceed as follows:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prepare the bed for installation:<br>Remove the plastic stoppers [1] from both ends of the chassis cross profile. |   |
| 2. | Remove the two screws on the left and right-hand side [2] to release the panel [2.1]. |   |
| 3. | Take the new screws out of the bag on the back of the wooden surround [3]. |   |
| 4. | Fit the wooden surround to the chassis so the hooks inside the surround (on both sides) fit exactly over the lugs on the chassis [4]. |   |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Now assemble the chassis panel and the wooden surround using the new screws 5 (refer to step 3). |   |
| 6. | Final result showing wooden surround fitted |  |

**Burmeier GmbH & Co. KG** (A Stiegelmeyer Group company)

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe, Germany - Phone: + 49 (0) 5232 / 9841 - 0 • Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 41

www.burmeier.de Email: info@burmeier.de

18/04/2019 | Version 0 | 279525