Anleitung · Burmeier

# Kurzanleitung Dali mit kabellosem Handschalter

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

| HERSTELLER | UMFANG | STAND |
|---|---|---|
| Burmeier GmbH & Co. KG | 4 Seiten im Original | 11/2024 |

## Pflegebett Dali bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

**careshop-24.de/Pflegebett-Dali-Burmeier**

Code scannen

## Seitensicherung


### Anstellen

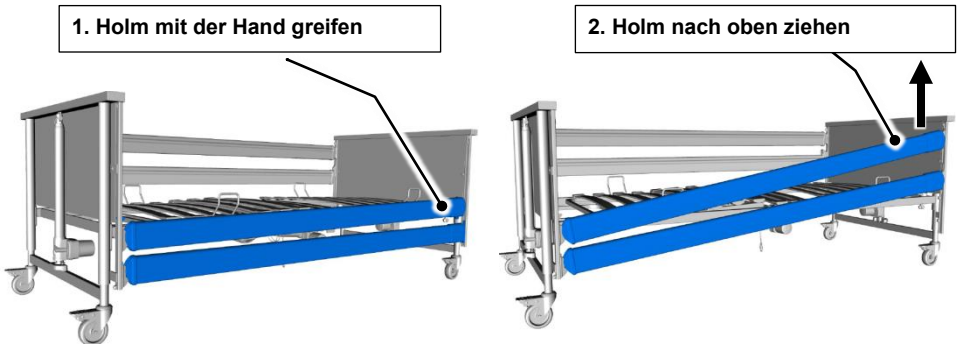


3. Prüfen Sie das Einrasten durch Druck auf die Seitensicherungsholme von oben.

4. Vorgang an den anderen Seiten wiederholen.


### Absenken

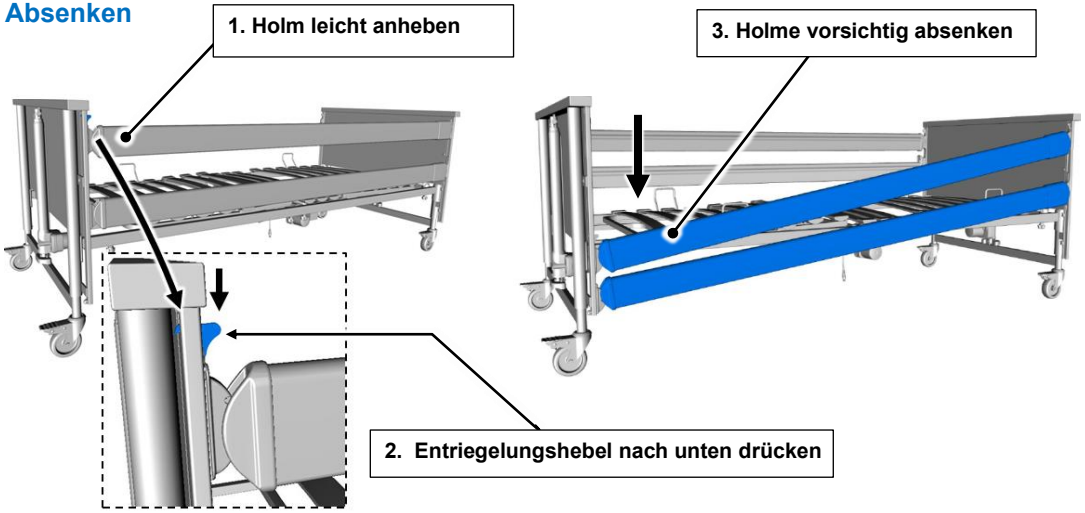



4. Vorgang an den anderen Seiten wiederholen.

## Triangelgriff

### Horizontale Verstellung

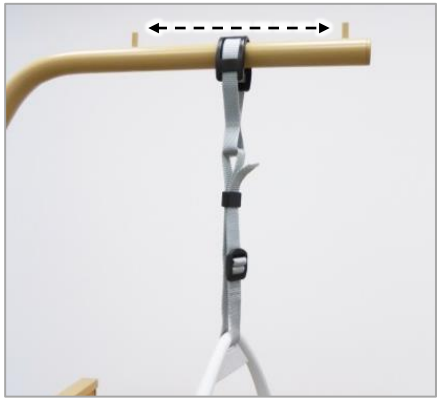

### Vertikale Verstellung

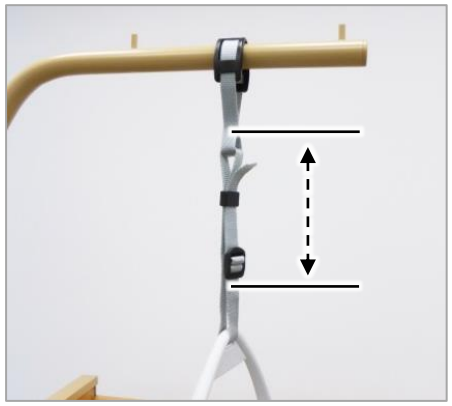

### Bedienung (verkürzen/verlängern)


Gurtband ① durch das Gurtschloss ② herausziehen:

**Verkürzen:** Gurtbandende ③ nach oben ziehen

**Verlängern:** Triangelgriff ④ nach unten ziehen

Maximale Tragfähigkeit 75 kg.


Achten Sie beim Verlängern darauf, dass das Ende des Gurtbandes mindestens 3 cm über dem Gurtschloss übersteht.

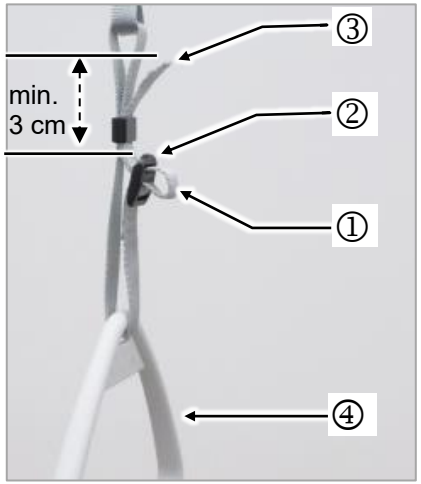

# Bluetooth-Handschalter (kabellos)

**(Bei Dali Standard, Dali low-entry und Dali wash)**

| | |
|---|---|
| **1** | Rückenlehne |
| **2** | Höhe Liegefläche |
| **3** | Oberschenkellehne |
| **4** | Fußtieflage |
| **5** | Magnetsensor (erkennbar durch das Fadenkreuz-Symbol) |
| **6** | Schlafposition |
| **7** | Batteriesymbol |
| **8** | LED |
| **9** | Sperrsymbol |

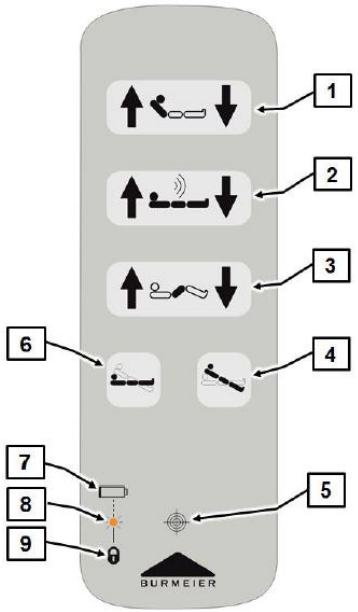


**Grundsätzlich gilt:**

= Heben

= Senken

**Weisen Sie den Bewohner in die Funktionen des Handschalters ein!**

- Die Antriebsmotoren laufen so lange, wie die entsprechende Taste gedrückt wird.
- Die Verstellmöglichkeiten sind, bis auf die Fußtieflage und Schlafposition, in beide Richtungen möglich.
- Der Handschalter ist wassergeschützt und abwischbar.
- Der Handschalter lässt sich mit seinem elastischen Haken am Bett einhängen.

## Sperrfunktionen – Bluetooth-Handschalter


**Beachten Sie bitte:**

Unten im Handschalter befindet sich ein Magnetsensor.

Für die Sperrung bzw. Entsperrung von Funktionen wird ein loser Magnet [a] (Teil der Lieferung) benötigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Verstellungen am Handschalter zu sperren / entsperren:

1. Mitgelieferten Magnet [a] an den in den Handschalter integrierten Magnetsensor halten
2. Anschließend die gewünschte Funktion sperren / entsperren.
   - Zum Sperren, die rechte Taste am Handschalter drücken. Zum Entsperren, die linke Taste drücken (siehe folgende Tabelle).

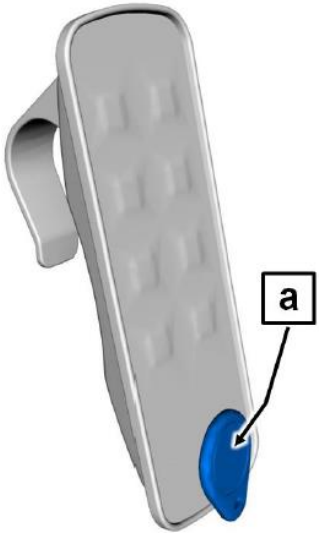


| Entsperren | Funktion | Sperren |
|---|---|---|
|  | **Rückenlehne** |  |
|  | **Höhe Liegefläche** |  |
|  | **Oberschenkellehne** |  |
|  | **Schlafposition / Fußtieflage** |  |

## Handschalter mit der Steuerung koppeln (nur bei Dali standard, Dali wash und Dali low-entry)

Beachten Sie bitte: Bevor die Bettfunktionen verstellt werden können, muss der Handschalter mit der Steuerung gekoppelt (verbunden) werden.

Das Koppeln ist nur relevant bei Inbetriebnahme des Bettes, Austausch des Bluetooth-Handschalters und Austausch der Steuerung.


Gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie zunächst den Magneten vom Handschalter, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

1. Schaltnetzteil in die Steckdose stecken.
   - War das Schaltnetzteil bereits in der Steckdose, Schaltnetzteil aus der Steckdose ziehen, ca. 10 s warten und wieder einstecken.
2. Innerhalb von 20 s die beiden Tasten Höhe Liegefläche Auf/Ab gleichzeitig (innerhalb von 0,5 s) für mindestens 5 s lang drücken.
   - Die LED an der Steuerung leuchtet 4 s lang orange auf, wenn die Kopplung erfolgreich war.
   - Die LED an der Steuerung blinkt 4x orange, wenn die Kopplung nicht erfolgreich war. In diesem Fall Schritt 1 und 2 wiederholen.

## Batterie - Bluetooth-Handschalter

Der Bluetooth-Handschalter wird mit einer CR-2032-Lithium Batterie betrieben.
Bei Nachlassender Batterie blinkt die LED-Anzeige am Handschalter bei jedem Tastendruck 4x gelb. Die Batterie muss dann innerhalb weniger Tage ausgetauscht werden.

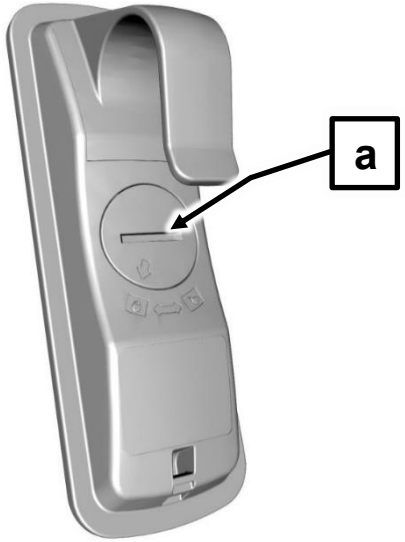


Gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches [a] auf der Rückseite des Handschalters.
   - Stecken Sie zum Beispiel eine Münze in den Schlitz der Abdeckung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie.
3. Setzen Sie die neue Batterie ein (dabei Polarität beachten).
4. Batteriefach mit der Abdeckung verschließen (im Uhrzeigersinn drehen).

## Laufrollen- Bedienung

**Vorsicht!** Laufrollen nur mit dem Fuß bedienen.
Tragen Sie beim Bedienen des Bettes geschlossene Schuhe, um Verletzungen an den Füßen zu vermeiden.

**Fahren:** Tritthebel [a] mit dem Fußrücken nach oben heben.

**Bremsen:** Tritthebel [a] mit dem Fuß nach unten treten.

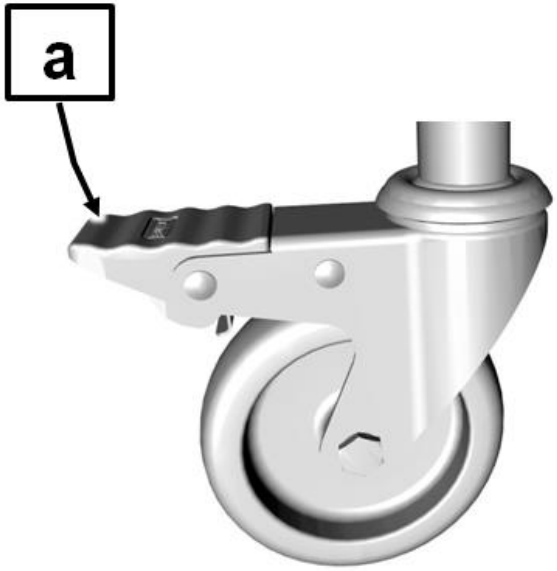


**⚠ VORSICHT**

Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Haupt-Gebrauchsanweisung des Pflegebettes Dali.
Haupt-Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und Sicherheitshinweise beachten!