Anleitung · Burmeier

Netzteil-Steckverbindung sichern (Klammer)

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	08/2021


Burmeier-Produkte bei careshop-24.de

- Pflegebetten, Matratzen und Zubehör von Burmeier
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte auf einer Seite


careshop-24.de/Burmeier

Code scannen


Sicherung SMPS Steckverbindung

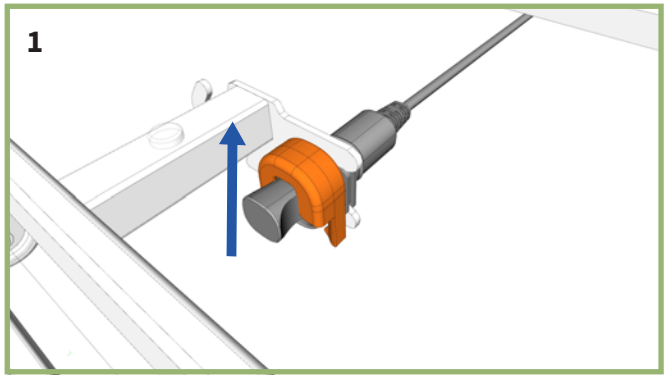

Ziehen Sie die Klammer nach oben, um die Sicherung zu lösen.

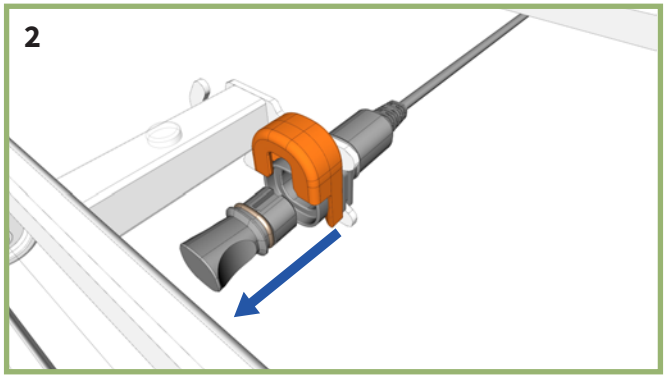


Entnehmen Sie ggf. den Stopfen.

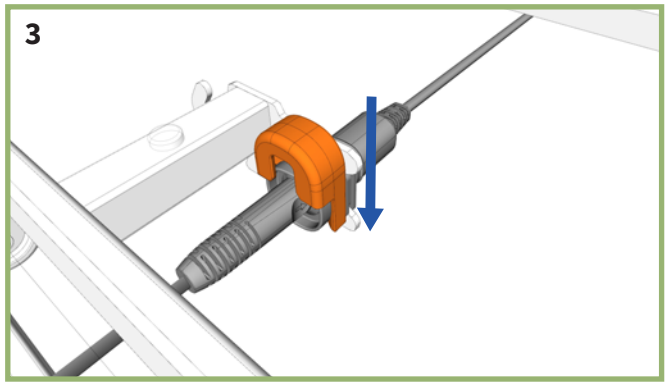

Stecken Sie das Netzkabel in die Bettanschluss-buchse und schieben Sie die Klammer von oben auf die Buchse.

Hinweis: Wenn Sie beim Aufschieben der Klammer einen Widerstand feststellen, überprüfen Sie bitte den Stecker des Netzkabels auf korrekten Sitz.

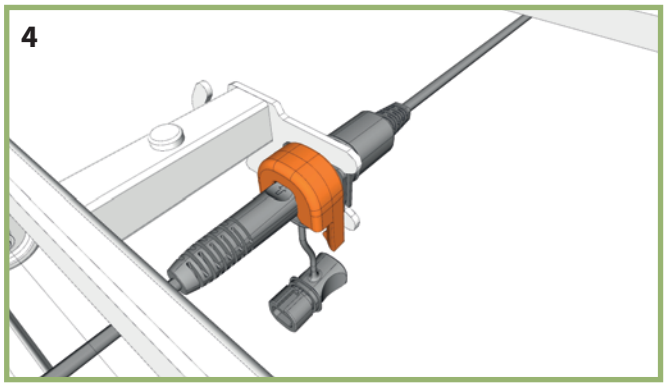

Die Verbindung SMPS / Bettanschlussbuchse ist hergestellt.

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen

Telefon +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
E-Mail info@burmeier.com
Internet www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stiegelmeyer-Gruppe